



[Fiche technique]

Echarpe triangulaire d'immobilisation - non-tissé 60 gr Lot de 50

Réf. 304852

Conditionné en lot de 50 vous permettant de réaliser une économie

Pourquoi acheter une écharpe oblique pompier ?

L'écharpe triangulaire de secourisme en non-tissé est un élément crucial dans les trousse de premiers secours, offrant un moyen rapide et efficace d'immobiliser les membres supérieurs lors de situations d'urgence. Voici une description détaillée de ses caractéristiques principales :

- **Matériau non-tissé de 60g :** L'écharpe est fabriquée à partir d'un matériau non-tissé léger mais résistant, offrant à la fois confort et durabilité lors de son utilisation.
- **Lot de 50 :** Le lot comprend 50 écharpes triangulaires, ce qui permet de répondre à un large éventail de besoins en matière de premiers secours dans divers environnements, que ce soit à la maison, sur le lieu de travail, ou dans des installations médicales.
- **Usage polyvalent :** L'écharpe triangulaire peut être utilisée pour immobiliser différentes parties du membre supérieur telles que l'épaule, l'avant-bras, le bras, le poignet ou la main, offrant ainsi une solution polyvalente pour divers types de blessures.
- **Immobilisation rapide :** Son format triangulaire permet une immobilisation rapide et efficace du membre blessé, offrant un soutien essentiel pendant les interventions de premiers secours.
- **Réduction de la douleur et des complications :** En plus d'immobiliser les mouvements du membre blessé, l'écharpe triangulaire contribue à réduire la douleur et à minimiser les complications associées aux blessures traumatiques, offrant ainsi un soulagement supplémentaire au patient.
- **Conditionnée sous sachet individuel :** Chaque écharpe est conditionnée individuellement dans un sachet, ce qui facilite son transport et son stockage tout en garantissant sa propreté et son hygiène jusqu'à son utilisation.
- **Facile à transporter :** En raison de sa compacité et de son emballage individuel, l'écharpe triangulaire peut être facilement glissée dans une trousse de secours, un sac à dos ou une trousse de premiers secours de véhicule, la rendant ainsi accessible en cas d'urgence.

Comment installer une écharpe triangulaire ?



1. Préparation et positionnement :
Commencez par plier l'écharpe triangulaire en diagonale pour former un triangle. Ensuite, positionnez le côté long du triangle sur le devant du cou de la personne blessée, en veillant à ce que la pointe du triangle pende vers l'avant.
2. Passage et fixation : Prenez le côté court du triangle et faites-le passer sous le bras blessé, puis sur l'épaule opposée. Ramenez-le ensuite vers l'avant et attachez-le solidement autour du cou de la personne pour assurer un maintien sécurisé.
3. Ajustement et vérification : Une fois l'écharpe en place, assurez-vous que le bras blessé est confortablement maintenu contre le corps et que l'écharpe offre un soutien adéquat. Il est important de vérifier également que l'écharpe n'entrave pas la respiration de la personne et d'ajuster si nécessaire pour assurer son confort et sa sécurité.

Pour toutes les parties du corps humain, SMSP propose une large gamme d'attelles permettant l'immobilisation. Jetez un coup d'œil par exemple au choix d'[attelle immobilisation cheville](#).

Caractéristiques techniques

Couleur	Transparent
Stérile	Non stérile
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Lot de 50
Tailles disponibles	Taille unique
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	304852
Quel age a la victime que vous souhaitez transférer?	Adulte
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	en lot

Photos




Echarpe triangulaire d'immobilisation
- non-tissé 60 gr Lot de 50



Echarpe triangulaire d'immobilisation
- non-tissé 60 gr Lot de 50



echarpe de l'épaule

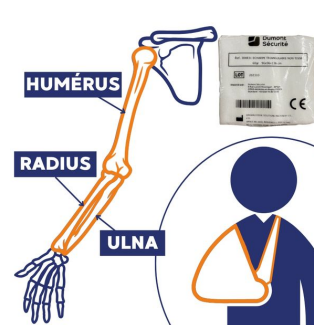

echarpe medical bras