



[Fiche technique]

Coussin hémostatique Coupe hémo - Lot de 5

Réf. 304844



Lot de 5

Le Lot de 5 Coussins Hémostatiques Coupe Hémo est la solution idéale pour les secouristes et les professionnels qui nécessitent un stock plus important pour faire face aux situations d'urgence. Chaque coussin est conçu pour intervenir efficacement en cas d'hémorragie externe, offrant une compression maîtrisée sans bloquer la circulation sanguine, tout en étant ultra-pratique et prêt à l'emploi. Ce pack multipack est idéal pour les entreprises, les équipes de secours et les trousseaux de premiers secours plus complets.

Pourquoi choisir ce lot de 5 Coussins Hémostatiques Coupe Hémo ?

L'acquisition de ce lot de 5 coussins permet de toujours avoir sous la main des dispositifs fiables pour gérer plusieurs situations d'urgence. Que vous soyez secouriste sur le terrain, professionnel de la santé ou responsable d'une équipe en milieu industriel, ce pack garantit une disponibilité immédiate en cas de besoin.

Caractéristiques des coussins hémostatiques Coupe Hémo :

- Pansement absorbant (20 x 15 cm) : Conçu pour absorber rapidement le sang, chaque coussin est doté d'un système de bande élastique cousue pour maintenir une pression efficace sur la plaie.
- Bande élastique avec partie non extensible : Pour éviter la surcompression, chaque coussin est équipé d'une section non élastique, garantissant une pression contrôlée sans risque de garrot artériel.
- Longueur totale de 123 cm : Fournit une couverture suffisante pour enrouler le membre blessé tout en maintenant une pression adéquate.
- Conditionnement stérile individuel : Chaque coussin est conditionné individuellement pour garantir une hygiène irréprochable, avec une paire de gants incluse pour éviter toute contamination.

Avantages du lot de 5 Coussins Hémostatiques Coupe Hémo :

- Solution économique : Ce lot de 5 coussins permet d'anticiper plusieurs urgences sans avoir à acheter des dispositifs à l'unité, ce qui est plus rentable pour les entreprises ou les professionnels.
- Disponibilité immédiate : Avoir plusieurs coussins à disposition garantit une intervention rapide et efficace pour chaque blessure, sans risque de manquer d'équipement en situation critique.
- Prêt à l'emploi : Chaque coussin est pré-assemblé avec sa bande élastique, permettant une utilisation rapide et facile en situation de stress.

Comment bien utiliser le Coussin Hémostatique Coupe Hémo ?

1. Ouvrir l'emballage : Sortir le coussin de son sachet scellé en prenant soin de ne pas endommager le

dispositif.

2. Appliquer le pansement absorbant : Placer le coussin directement sur la plaie, en pressant fermement pour ralentir l'hémorragie.
3. Enrouler la bande : Enroulez la bande élastique autour du membre blessé, en veillant à maintenir une pression constante sur le coussin et en laissant le coussin déborder de chaque côté.
4. Ajuster la tension : Selon la gravité du saignement, ajustez la tension de la bande. Si le saignement persiste, augmentez légèrement la pression.
5. Vérifier le pouls : Après application, contrôlez le pouls en aval de la plaie. Si le pouls disparaît, relâchez la tension pour éviter une compression excessive.

Sécurité d'utilisation :

- Vérifier l'intégrité de l'emballage : Ne pas utiliser si le sachet est endommagé ou ouvert avant utilisation, cela compromettrait la stérilité du dispositif.
- Contrôler visuellement la mousse : Si la mousse a jauni ou brunie, cela peut indiquer une détérioration du produit due à une exposition prolongée à la lumière ou à la chaleur.
- Respecter la date de péremption : Ne pas utiliser si la date limite d'utilisation est dépassée, car l'efficacité des éléments peut être réduite.
- Éliminer correctement après usage : Le coussin est un dispositif médical à usage unique et doit être éliminé comme déchet de soin après utilisation.

À qui s'adresse ce lot de 5 Coussins Hémostatiques Coupe Hémo ?

Ce lot est idéal pour :

- Les secouristes professionnels et équipes de secours : Disposer de plusieurs dispositifs permet de répondre efficacement à plusieurs situations d'urgence simultanément.
- Les entreprises à haut risque : Secteurs industriels, chantiers, ou lieux où les accidents peuvent être fréquents nécessitent une préparation optimale.
- Les trousseaux de secours en milieu scolaire ou public : Un stock de coussins hémostatiques est indispensable pour assurer la sécurité dans des lieux où plusieurs personnes peuvent être blessées.

Pourquoi opter pour le lot de 5 ?

Le lot de 5 Coussins Hémostatiques Coupe Hémo permet de sécuriser plusieurs interventions en disposant d'un stock suffisant pour faire face à différentes urgences. Ce pack offre une solution économique pour les professionnels ou les entreprises qui souhaitent être bien équipés en cas de besoin. Grâce à sa conception hygiénique, prête à l'emploi et facile à utiliser, chaque coussin garantit une réponse rapide, efficace et sécurisée.

Soyez prêt à réagir face à toute situation d'hémorragie avec ce lot de 5 coussins hémostatiques Coupe Hémo, l'équipement essentiel pour des interventions rapides et maîtrisées.

Découvrez notre large gamme de [pansement hémostatique](#).

Informations complémentaires

Emballage individuel sous film PEBD 100µ.

Dispositif médical à usage unique.

Risque de contamination par le sang en cas de réutilisa-tion sur une peau lésée.

Ne pas utiliser si l'emballage est altéré avant utilisation. Risque de contamination en cas d'utilisation sur une peau lésée.

Une exposition à la lumière et la chaleur provoque un vieillissement de la mousse (elle peut devenir marron) ne garantissant plus sa capacité d'absorption.

Utiliser un autre coussin hémostatique si la mousse est jaunie.

Le coussin hémostatique est un dispositif médical qui doit être donc traité comme un déchet de soin.

Si la date limite d'utilisation est dépassée, ne pas utiliser ce dispositif car les éléments peuvent être moins performants.

Si le dispositif est défectueux, utiliser un autre coussin.


Caractéristiques techniques

Dimensions	Longueur totale : 123 cm
Caractéristiques produit	Emballage individuel sous film PEBD 100µ. Dispositif médical à usage unique. Risque de contamination par le sang en cas de réutilisa-tion sur une peau lésée. Ne pas utiliser si l'emballage est altéré avant utilisation. Risque de contamination en cas d'utilisation sur une peau lésée. Une exposition à la lumière et la chaleur provoque un vieillissement de la mousse (elle peut devenir marron) ne garantissant plus sa capacité d'absorption. Utiliser un autre coussin hémostatique si la mousse est jaunie. Le coussin hémostatique est un dispositif médical qui doit être donc traité comme un déchet de soin. Si la date limite d'utilisation est dépassée, ne pas utiliser ce dispositif car les éléments peuvent être moins performants. Si le dispositif est défectueux, utiliser un autre coussin.
Couleur	Blanc
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Mousse en polyéther. Elastique en élastodiène non tissé avec velcro. Paire de gants en vinyle
Unité de vente	Lot de 5
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Code SH	3005903100
Référence fabricant (MPN)	304844
Etanche	Non

Photos



Coussin hémostatique Coupe hémo - Lot de 5

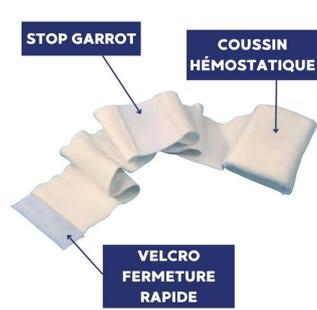


Coussin hémostatique Coupe hémo - Lot de 5



Coussin hémostatique Coupe hémo - Lot de 5



Coussin hémostatique Coupe hémo - Lot de 5

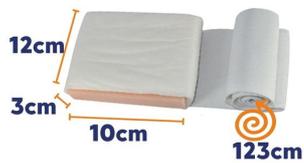

Coussin hémostatique Coupe hémo - Lot de 5