



[Fiche technique]

## Filet tubulaire de maintien pour pansements et compresses - 50 m

Réf. 304241-304341-304242-304342-304243-304244-304344

### Choisissez la partie du corps: doigt, main, bras, jambe, thorax, tête Maintien pansements ou compresses

Sans latex, ce bandage tubulaire est un matériel indispensable à disposer dans une armoire à pharmacie ou une trousse de secours. Idéal pour les sportifs.

### Comment mettre un jersey tubulaire?

Pour utiliser un jersey tubulaire à des fins médicales, vous pouvez le faire pour maintenir des pansements ou des compresses en place. Voici comment le faire :


Matériel requis :

- Jersey tubulaire de la taille appropriée.
- Pansements ou compresses.
- Ciseaux (si nécessaire).

Étapes :

1. Choisissez la taille appropriée du jersey tubulaire en fonction de la zone que vous souhaitez couvrir. Assurez-vous que le jersey est propre et en bon état.

## Filet tubulaire

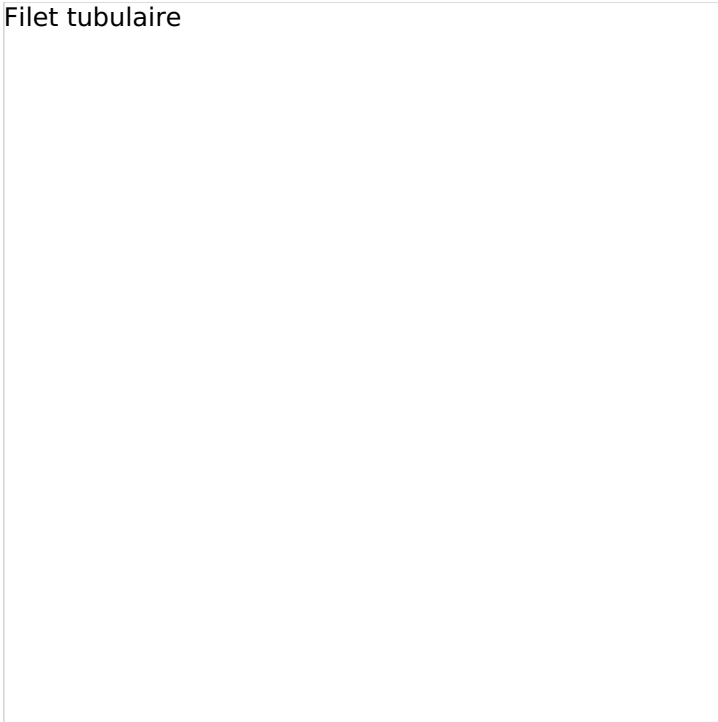

2. Préparez vos pansements ou compresses. Les pansements ou compresses doivent être de la taille appropriée pour couvrir la zone blessée ou le site de l'intervention médicale.
3. Si le jersey tubulaire n'a pas d'ouverture, vous pouvez en créer une. Utilisez des ciseaux propres pour couper un petit trou à une extrémité du jersey tubulaire, assez grand pour permettre le passage de la zone à pansement. Veillez à ne pas couper le jersey en bandage.
4. Enfilez doucement le jersey tubulaire sur la zone à protéger. Assurez-vous qu'il est suffisamment ajusté pour maintenir les pansements ou compresses en place, mais pas trop serré pour ne pas gêner la circulation sanguine.
5. Placez les pansements ou compresses sur la zone affectée ou la plaie.
6. Passez doucement le jersey tubulaire par-dessus les pansements ou compresses pour les maintenir en place. Assurez-vous que les pansements sont bien recouverts et maintenus fermement.
7. Ajustez le jersey tubulaire au besoin. Assurez-vous que tout est sécurisé en place, mais sans exercer une pression excessive.
8. Si vous avez coupé une ouverture pour le passage de la zone à pansement, vérifiez que le jersey tubulaire est bien positionné pour couvrir la zone.
9. Assurez-vous que le patient est à l'aise et que le pansement reste en place. Surveillez la zone pour détecter tout signe d'infection ou de complication.

## Informations complémentaires

Longueur extensible de 50 mètres de la taille 0 à 5 et de 25 mètres pour la taille 6.

## Caractéristiques techniques

<b>Matière</b>	73% polyamide, 27% caoutchouc
<b>Unité de vente</b>	La boîte distributrice
<b>Normes et Certification</b>	Dispositif médical de classe 1

## Références

<b>Réf. 304241</b>	Filet tubulaire T0 pour doigt Dimensions : 50 m étiré
<b>Réf. 304341</b>	Filet tubulaire T1 pour main Dimensions : 50 m étiré
<b>Réf. 304242</b>	Filet tubulaire T2 pour bras, genoux et jambe Dimensions : 50 m étiré.
<b>Réf. 304342</b>	Filet tubulaire T3 pour bras, jambe et épaule Dimensions : 50 m étiré
<b>Réf. 304243</b>	Filet tubulaire T4 pour tête, cuisse et hanches Dimensions : 50 m étiré
<b>Réf. 304244</b>	Filet tubulaire T5 pour cuisses, hanches, thorax et tête Dimensions : 50 m étiré
<b>Réf. 304344</b>	Filet tubulaire T6 pour aisselles, thorax et bassin Dimensions : 25 m étiré


## Photos



Filet tubulaire de maintien - 50 m



Filet tubulaire de maintien - 50 m

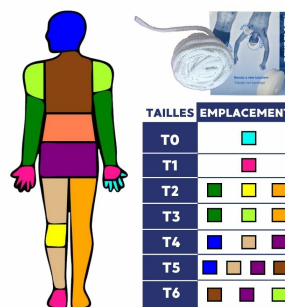

Filet tubulaire de maintien - tailles