



[Fiche technique]

Compresse oculaire Eycopad 70 x 85 mm - Boîte de 50

Réf. 120013

Dimensions: 70 x 85 mm

Conditionnement: Boîte de 50

Compresse oculaire de forme anatomique destinée à des soins de l'œil.

Pansement oculaire confortable et doux.

La compresse ophtalmique Eycopad est dotée d'un coussinet de coton hydrophile recouverte des deux côtés de gaze 18 fils.

Comment mettre ou appliquer une compresse oculaire?

L'application d'une compresse oculaire est une procédure relativement simple, mais il est essentiel de suivre quelques étapes pour le faire en toute sécurité et efficacement. Voici comment mettre ou appliquer une compresse oculaire :

Matériel nécessaire :

- Une compresse oculaire stérile
- De l'eau propre ou une solution saline stérile, si nécessaire
- Un bol propre pour tremper la compresse, si nécessaire

Étapes pour appliquer une compresse oculaire :

- 1. Lavez-vous les mains : Avant de toucher la compresse ou de vous approcher de l'œil, assurez-vous de vous laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau pour éviter toute contamination.
- 2. Préparez la compresse : Assurez-vous que la compresse est propre et stérile. Si elle n'est pas stérile, vous pouvez la stériliser en la trempant dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Attendez ensuite qu'elle refroidisse à température ambiante ou utilisez une solution saline stérile.
- 3. Installez-vous confortablement : Asseyez-vous dans un endroit confortable avec une surface propre et bien éclairée. Vous pouvez également vous tenir debout devant un miroir si cela vous aide.
- 4. Imprégnez la compresse (si nécessaire) : Si votre professionnel de la santé vous a recommandé d'utiliser une compresse humide, trempez-la doucement dans de l'eau propre ou de la solution saline stérile. Essorez légèrement l'excès de liquide pour éviter les dégouttements.
- 5. Fermez l'œil non affecté : Si vous n'appliquez la compresse que sur un œil, commencez par fermer l'autre œil.



- 6. Appliquez la compresse : Tenez la compresse délicatement, en évitant de toucher la partie qui sera en contact avec l'œil. Placez la compresse sur la paupière fermée de manière à recouvrir doucement l'œil affecté.
- 7. Maintenez en place : Maintenez la compresse en place avec un léger contact, sans exercer de pression. Vous pouvez utiliser une main pour maintenir la compresse en place et l'autre pour soutenir votre coude.
- 8. Gardez l'œil fermé : Gardez l'œil fermé pendant toute la durée recommandée par votre professionnel de la santé ou selon les instructions du produit que vous utilisez. Cela permettra à la compresse de faire effet.
- 9. Retirez la compresse : Après la durée recommandée, retirez délicatement la compresse de l'œil. Assurez-vous de ne pas frotter l'œil.
- 10. Jetez la compresse : Si la compresse est jetable, jetez-la immédiatement après utilisation. Si elle est réutilisable, nettoyez-la et stérilisez-la avant de la ranger pour une utilisation ultérieure.

Si vous avez des préoccupations concernant un problème oculaire ou si vous avez reçu des instructions spécifiques de la part de votre professionnel de la santé, suivez toujours ses conseils pour l'application de compresses oculaires. Si vous ressentez une douleur, une irritation ou une détérioration de votre vision pendant ou après l'application de la compresse, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Informations complémentaires

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie 5 ans.



Caractéristiques techniques

Marque Hartmann

Dimensions 70 x 85 mm

Caractéristiques produit

Couleur Blanc

Utilisation Usage unique

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière Ouate enveloppée de gaze hydrophile en coton pur.

Unité de vente Boite de 50 (sous emballage individuel en pochette pelable)

Garantie 1

Normes et Certification EN 14079

Classification Dispositif medical de classe 1s

Partie du corps

Code SH 3005901000


Référence fabricant (MPN) 417650

Etanche Non

Poids du produit 0.02

Photos



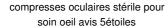



dimension compresses oculaires



comment mettre une compresse oculaire ?



compresses oculaires