



[Fiche technique]

## Rince oeil Plum - Coffret étanche PH neutral

Réf. 970472

**Coffret contenant 1 flacon 200 ml de pH neutre et 1 flacon 500 ml de solution saline.**

**pH neutre pour les projections chimiques et chlorure de sodium à 0,9% pour les poussières et corps étrangers.**

- Toutes projections de produits chimiques dans les yeux doivent faire l'objet d'un nettoyage immédiat afin de prévenir des lésions graves de l'oeil.
- Lave oeil PLUM : station murale étanche à la poussière.
- A disposer près des postes de travail présentant un risque de projection et/ou brûlure chimiques aux yeux.
- Ce coffret de lavage oculaire est spécialement adapté aux environnements sales et poussiéreux pour parer à toute éventualité.  
Station rince oeil recommandé pour les environnements de travail suivants : verreries, laboratoires, entrepôts de stockage de produits dangereux.
- Coffret rince oeil composé de :
  - Un flacon bleu de pH Neutral PLUM (200 ml) pour neutraliser les acides et les bases forts (tampon phosphate 4.9%).  
pH Neutral est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts.  
Le liquide se compose de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain.
  - Un flacon de solution lave-oeil PLUM (500 ml)
  - Couvercle de fermeture avec miroir intérieur et signalétique d'utilisation.
- Pour recharger le coffret rince oeil après utilisation :
  - [Flacon pH Neutral PLUM](#)
  - [Flacon NaCl Plum](#)
- Conseil : après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un Lave-oeil Plum jusqu'à intervention du médecin.
- Découvrez notre gamme complète de [rince oeil](#).


## Informations complémentaires

Disponible en version chauffée grâce à une alimentation 12 ou 24V (nous consulter).

## Caractéristiques techniques


<b>Marque</b>	Plum
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 28 x 23 x 11 cm
<b>Composition de l'ensemble</b>	1 coffret 1 flacon 200 ml de pH Neutral PLUM 1 flacon lave-oeil PLUM de 500 ml
<b>Poids</b>	1.25 kg
<b>Instructions d'utilisation</b>	Temps de rinçage préconisé : environ 10 minutes. Il est ensuite conseillé de continuer le lavage avec le flacon lave-œil à base de solution Saline jusqu'à l'intervention du médecin.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de classe 1s
<b>Partie du corps</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 970530 - Coffret mural étanche pour rince oeil Plum - livré vide

## Photos




**2 TAILLES**


2 tailles de rince œil pour éliminer poussière, corps étranger et produits chimique dispositif médical de classe 1s



Rince oeil Plum - Coffret étanche PH neutral

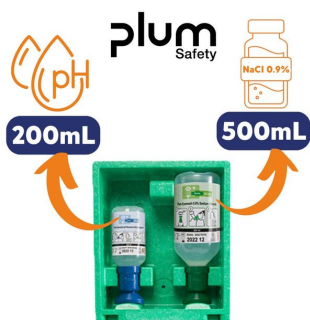

Rince oeil Plum - Coffret étanche PH neutral

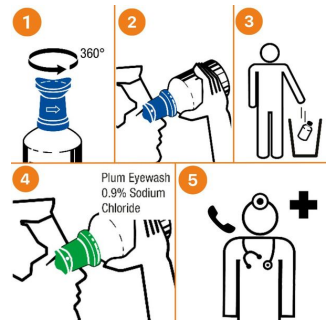

Rince oeil Plum - Coffret étanche PH neutral