



[Fiche technique]

## Ceinture de contention abdominale au lit, maintien pelvien et système fermeture

Réf. 503970

### CONTENTION

**Tour de taille 68-108 cm. Compatible avec les produits de la gamme Salvafix. VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE titulaires d'une immatriculation RPPS**

*VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS titulaires d'une immatriculation RPPS.*

La ceinture de contention abdominale au lit est un [matériel de contention](#) conçue pour assurer un maintien pelvien sécurisé et un confort optimal lors de l'immobilisation. Adaptée aux tours de taille de 68 à 108 cm et d'une hauteur de 18 cm, elle garantit un maintien ferme sans compromettre le confort. Équipée de 3 systèmes de fermeture magnétique et livrée avec une clé, cette ceinture est idéale pour une utilisation en milieu médical ou à domicile.

En préambule, veuillez noter que la vente de ce type de produits est exclusivement destinée à des professionnels de santé possédant une immatriculation RPPS. Nous rappelons que la contention physique, en France, est strictement encadrée par un cadre juridique et réglementaire:

- LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (Source: [Légifrance](#))
- Article L3222-5-1 , Code de la santé publique (Source: [Legifrance](#))

100% polyester lavable à 90°

Pour une utilisation avec un lit ou une civière

### Comment installer la ceinture de contention abdominale ?


Caractéristiques principales de la ceinture de contention

- Tour de taille ajustable : 68 à 108 cm
- Hauteur : 18 cm pour un maintien abdominal optimal
- Systèmes de fermeture : 3 fermetures magnétiques pour une fixation rapide et sécurisée
- Accessoire de sécurité : 1 clé fournie pour un verrouillage fiable
- Dispositif médical de classe 1 : Conforme aux normes pour une utilisation en toute sécurité
- Réutilisable : Conçue pour une utilisation prolongée et répétée

## Confort et sécurité avec la ceinture de contention abdominale

Cette ceinture de contention abdominale assure un maintien stable du bassin et de l'abdomen, évitant tout déplacement involontaire lors de l'immobilisation au lit. Les fermetures magnétiques sécurisées facilitent l'ajustement et garantissent une fixation fiable. Conçue avec des matériaux de qualité, elle offre un port confortable, même pendant de longues périodes.

## Utilisation et praticité de la sangle de contention

La ceinture de contention abdominale pour lit est idéale pour les établissements de santé, les soins à domicile ou les situations nécessitant un maintien pelvien sécurisé. Réutilisable, elle est facile à entretenir et garantit une longue durée de vie. Son système de fermeture magnétique avec clé offre une manipulation rapide et un verrouillage sûr.

## Contenu de la sangle de contention pelvienne

- 1 ceinture de contention abdominale
- 3 systèmes de fermeture magnétique
- 1 clé de verrouillage

## Pourquoi choisir cette ceinture de contention abdominale ?

- Maintien abdominal et pelvien sécurisé
- Tour de taille ajustable (68-108 cm)
- Systèmes de fermeture magnétique pratiques et sûrs
- Réutilisable et durable
- Dispositif médical de classe 1, conforme aux normes

À la recherche d'un [attache poignet médical](#) ? Il est disponible sur [smsp.fr](http://smsp.fr), consultez notre catalogue.

## Informations complémentaires

Produit inflammable.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Medicare System
<b>Dimensions</b>	Tour de taille 68-108 cm / hauteur 18 cm.
<b>Caractéristiques produit</b>	Produit inflammable.
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	100% polyester. Absence de latex, de phtalates et de produit d'origine animale ou biologique.
<b>Taille lettre</b>	M
<b>Livré avec</b>	3 systèmes de fermeture magnétique et 1 clé.
<b>Instructions d'utilisation</b>	Produit utilisé uniquement sur prescription médicale. Veillez à ce que la clé magnétique soit éloignée d'au moins 15 cm chez des patients avec régulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence ou un risque de tachycardie.
<b>Entretien</b>	A conserver à l'abri de la lumière dans un endroit propre et sec. Avant le lavage de la ceinture retirer les fermetures et la clé. Nettoyage en machine à 90° C maximum. Séchage en machine à une température modérée. Passage en tunnel de séchage possible. Nettoyer régulièrement la partie crochet de la fermeture « velcro » avec une brosse dure pour éliminer les peluches et les fils. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas repasser.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	90211010
<b>Lavable</b>	Oui
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 503976 - Clé magnétique contention aimant néodyme gamme Salvafix coloris bleu Réf. 503977 - Fermeture magnétique gamme Salvafix

## Photos



### CONTENTION

ceinture de contention  
abdominale au lit, maintien  
pelvien et système fermeture  
Tour de taille 68-108 cm


Ref. 503968 Ref. 503977



x3

### LIVRE AVEC

ceinture de contention  
abdominale au lit, maintien  
pelvien et système fermeture  
Tour de taille 68-108 cm

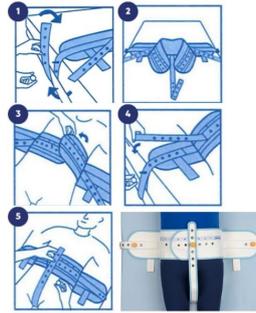

ceinture de contention  
abdominale au lit, maintien  
pelvien et système fermeture  
Tour de taille 68-108 cm